



Geschikt t/m decubitus cat.
3

max.
150 kg

TERRA



Q VIVE TERRA

Dynamisch matrasvervangend systeem met
vervangbare TPU-cellen & incontinentiehoes

EIGENSCHAPPEN


Q VIVE TERRA® is een matrassvervangend systeem, dat luchtcellen en traagschuim combineert met een actieve alternerende luchtceltechnologie voor optimaal comfort voor de cliënt en hoogwaardige preventie bij decubitus. Het matras in combinatie met een pomp zorgen voor hoogwaardige preventie en herstel van decubitus en geven de cliënt veel stabiliteit door de hoogwaardige schuimlaag. Q VIVE TERRA® is specifiek ontwikkeld voor cliënten met een risico op het ontwikkelen van decubitus.

Q VIVE TERRA® is gemaakt met premium kwaliteit materialen, duurzaam en betrouwbaar. Het anti-decubitus matras is beschikbaar in diverse afmetingen, passend bij elk formaat bed. Dit kan zijn bij de cliënt thuis of in een zorginstelling. Het anti-decubitus matras is standaard uitgevoerd met een BI-stretch incontinentiehoes.

Geschikt voor gebruikers van alle leeftijden met een maximaal gewicht tot **150 kg**.

Q VIVE TERRA® is vanwege onderstaande eigenschappen onmisbaar voor de behandeling van decubitus:

- Optimale drukverdeling voor verbeterde bloedsomloop en decubitusgenezing;
- Ultrastille pomp voor een rustige slaapomgeving;
- Automatische instellingen met de mogelijkheid om deze handmatig aan te passen voor individuele instelling;
- IPS-technologie past de luchtdruk perfect aan de individuele cliënten en hun bewegingen;
- Alarm bij lage druk of stroomuitval;
- Uitsparingen aan de zijkant voor slang- en celsluitingen om drukpunten op het oppervlak te voorkomen;
- Handvatten voor gebruiksgemak en zorgvuldige evacuatie bij calamiteiten;
- Gesp en riemen aanwezig om het matras veilig aan de bedbodem te bevestigen;
- Duurzame en waterbestendige BI-stretch hoes;
- Verborgen rits.

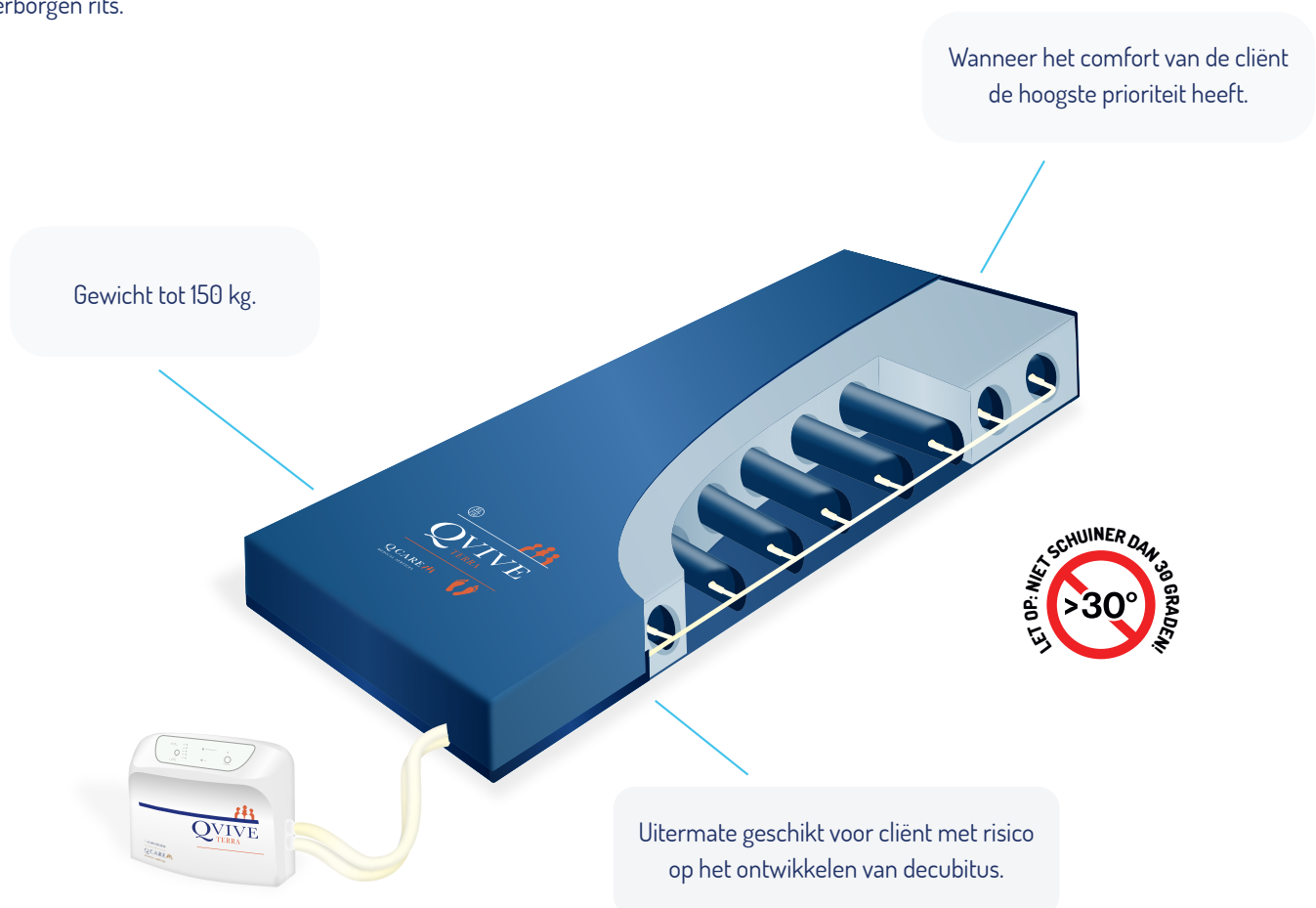

Q Care Service & Producten is onderdeel van Q Care medical services B.V.

Q Care is een autoriteit op het gebied van decubituszorg. Wij bieden praktische wond- en decubituszorg aan elke cliënt die daar behoefte aan heeft. Q Care ontzorgt en ondersteunt bij de inzet van anti-decubitus hulpmiddelen, indicaties en de behandeling van doorligwonden.

Onderdeel van deze strategie is waar mogelijk een verschuiving te realiseren van curatieve naar preventieve inzet.



Wij reinigen en desinfecteren AD-systemen conform onze hoogwaardige standaarden voor medische hulpmiddelen, waarin cliënt en gebruikersveiligheid voorop staan. Zo voldoen onze hulpmiddelen altijd aan de geldende kwaliteitsnormen.

SPECIFICATIES

Type matras:	Hybride matras
Formaat matras:	80 x 200 cm 85 x 200 cm 85 x 210 cm 85 x 220 cm 90 x 200 cm 90 x 210 cm 90 x 220 cm
Aantal luchtcellen:	10 stuks (afhankelijk van het formaat)
Gewicht pomp:	2,5 kg
Gewicht matras:	8 kg
Stroomverbruik:	Normaal verbruik max. 20 w
Luchtcellen:	Nylon/ TPU
Traagschuim:	Toplaag: traagschuim Onderlaag: koudschuim
Hoes:	BI-stretch



Altijd hét allerbeste AD-systeem

Wat ons uniek maakt is dat een gespecialiseerde verpleegkundige van Q Care optimaal kijkt naar de zorgsituatie van de cliënt. Dit doen we door een zorgvuldige anamnese **direct aan het bed**.

Na deze anamnese installeren we **direct** het best passende AD-systeem, gericht op het verbeteren van het welzijn van de cliënt. Daarnaast houden we de decubitusituatie nauwlettend in de gaten door **periodieke herindicaties**.





Beoordeeld met een

9.0



Dé landelijke wond- en decubituspecialist

Q Care ondersteunt zorginstellingen en de thuiszorg bij de levering van AD-hulpmiddelen, indicaties en decubituspreventie. Op deze manier heeft de zorg nóg meer tijd voor de cliënt, voorkomen we ernstige wonden en besparen we zorgkosten. Daarnaast kunnen we als flexibele schil personeelstekorten bij zorgorganisaties opvangen en zo de kwaliteit blijven waarborgen. **Welzijn voor iedereen** is daarin de centrale gedachte. Hierin worden we ondersteund door Q Care Service & Producten en Q Care Academie.



📍 Q Care medical services B.V.
Laarakkerweg 28, 5061 JR Oisterwijk
013 522 06 06 | info@qcare.nl | www.qcare.nl